

# *Glass*

## Fitness Scale

## Фітнес Ваги

(Надміцна скляна поверхня)

**Інструкція з експлуатації**  
**Модель: ORION OS013F**



\*\*\*\*\*

**Шановні покупці!**  
**Дякуємо Вам за придбання**  
**фітнес ваг Orion OS013F!**

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього пристрою!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

\*\*\*\*\*



# Зміст


Правила безпечного користування	4
Зовнішній вигляд	4
Встановлення елементів живлення (батареєнок)	4
Вимірювання ваги тіла без запам'ятовування результату	4
Вимірювання ваги з запам'ятовуванням результату (1) Для тих, хто користується вагами перший раз	5
Вимірювання ваги з запам'ятовуванням результату (2) Для тих, хто вже вибрав позицію пам'яті раніше	6
Технічні характеристики	7

## Правила безпечного користування

- Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію.
- Встановіть ваги на плоскій та твердій поверхні.
- Не встановлюйте ваги поблизу джерел електромагнітних хвиль, таких як: мікрохвильові печі, стільникові телефони і т.д.
- Оберегайте ваги від випадкових ударів.
- Оберегайте ваги від попадання на них води та інших рідин.
- Не користуйтеся розчинами, щоб почистити ваги.
- Оберегайте ваги від попадання на них прямого сонячного світла.

**Збережіть дану інструкцію.**

## Зовнішній вигляд

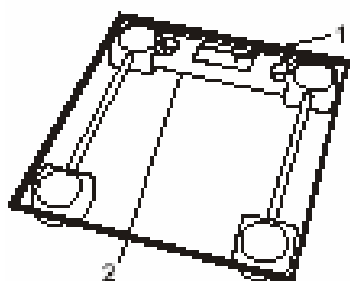



1. ЖК-дисплей.
2. Кнопка перемикання одиниці виміру ваги кг/фунти (kg/lb). (Розташована знизу приладу).


## Встановлення елементів живлення (батареєнок)

1. Зніміть кришку відсіку елементів живлення.
2. Встановіть 4-и елементи живлення розміром ААА.
3. Закрийте відсік елементів живлення кришкою

## Вимірювання ваги тіла без запам'ятовування результату

	Доторкніться до ваг один раз, щоб прилад увімкнувся. На дисплеї з'явиться значок: "----"(kg/kg).
	Станьте на ваги лише після того, як з'явиться значок 0.0 kg, і постійте декілька хвилин. Результат зважування висвітлиться на дисплеї.
	Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з них.

**Увага!** Для збереження приладу та Вашої безпеки, не ставайте на край приладу.

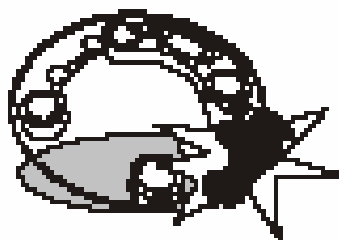

## Вимірювання ваги з запам'ятовуванням результату (1)

Для тих, хто користується вагами перший раз.

	<p>Доторкніться до ваг один раз, щоб прилад увімкнувся. На дисплеї з'явиться значок: "----"(kg/lb) (кг/фунт).</p>
	<p>Доторкніться ще один раз, щоб з'явився значок 0.0. На дисплеї буде блимати номер позиції налаштування пам'яті. Якщо Вам потрібно знайти інший номер позиції пам'яті (від 01 до 04), то доторкайтесь до ваг до тих пір, поки він не з'явиться.</p>
	<p>Після цього на дисплеї висвітиться значок "±----kg/lb" (кг/фунт). (Різниця поточного і попереднього зважування).</p>
	<p>Станьте на ваги лише після того, як з'явиться значок 0.0 kg, і постійте декілька хвилин. Результат зважування висвітиться на дисплеї почергово з "±----kg/lb"..</p>
	<p><b>Увага!</b> Для збереження приладу та Вашої безпеки, не ставайте на край приладу.</p>
	<p>Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з них.</p>

## Вимірювання ваги з запам'ятовуванням результату (2)

Для тих, хто вже вибрав позицію пам'яті раніше.

	<p>Доторкніться до ваг один раз, щоб прилад увімкнувся. Доторкніться ще один раз, щоб з'явився значок 0.0. На дисплеї буде блимати номер позиції налаштування пам'яті. Якщо Вам потрібно знайти інший номер позиції пам'яті (від 01 до 04), то доторкайтесь до ваг до тих пір, поки він не з'явиться.</p>
	<p>На дисплеї з'являться Ваші останні дані. Показники ваги (вага тіла і різниця поточного і попереднього зважування) будуть з'являтися по чергово.</p>
	<p>Станьте на ваги лише після того, як з'явиться значок 0.0 kg, і постійте декілька хвилин.</p>
	<p>Показники ваги (вага тіла і різниця поточного і попереднього зважування) будуть з'являтися по чергово на дисплеї приладу.</p>
	<p><b>Увага!</b> Для збереження приладу та Вашої безпеки, не ставайте на край приладу.</p>
	<p>Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з них.</p>

### Зверніть увагу!

1. Коли ваги перевантажуються, то на дисплеї з'являється значок "FFFF".
2. Якщо Ви не користуєтесь приладом, то поставте його горизонтально в зручному для Вас місці і нічого не кладіть на нього зверху.
3. Не ставайте на ваги вологими ногами.

## Технічні характеристики

Одиниця виміру ваги	0.1 кг / 0.2 фунта
Елементи живлення	2 x CR2032
Сертифікати	CE/FCC
4 позиції налаштування пам'яті	01 - 04
Індикатор зарядженої батареї	+
Легкість у використанні і автоматичне вимкнення	+
Габарити	280 (Д) x 280 (Ш) x 40 (В) мм
Максимальна вага	160 кг/352 фунта