

ORION®

ORION ELECTRONICS LTD (EUROPE)



ЕЛЕКТРОГРІЛКА ДЛЯ СПИНИ ТА ШИЇ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОДЕЛЬ: ORION OWP15NB

Дякуємо за Ваш вибір ЕЛЕКТРОГРІЛКИ "ORION". Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно дану Інструкцію й зберігайте її в доступному місці.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Завжди будьте дуже уважні з електроприладами!

Ця електрогрілка прослужить Вам довгі роки, якщо ви будете додержуватися всіх інструкцій, використовувати її тільки за призначенням й дбайливо до неї ставитися. Уважно прочитайте наступні інструкції, щоб уникнути будь-яких ушкоджень і небезпеки від неправильної експлуатації приладу. Збережіть Інструкцію, щоб завжди можна було переглянути правила користування.

Якщо приладом користується ще хтось крім Вас, дайте йому спершу почитати Інструкцію.

Цей прилад не призначений для медичного використання в лікарнях

- Уважно прочитайте й додержуйтеся інструкцій.
- Прилад призначений для використання як грілка для спини та шиї.
- Під'єднайте до електромережі з електроживленням, зазначеним на етикетці приладу.
- Забороняється користуватися грілкою в складеному або в зім'ятому вигляді.
- Електрогрілкою забороняється користуватися людям, які не в змозі рухатися без сторонньої допомоги, маленьким дітям, людям, які не відчують тепла, тваринам.
- Забороняється користуватися грілкою без нагляду.
- Увага! Не спіть під час роботи грілки.
- Тривале використання може бути причиною опіків.
- Забороняється проколювати електрогрілку голкою або іншими гострими предметами.
- Забороняється силою тягти за мережевий шнур, скручувати його.
- Забороняється занурювати перемикач або мережевий шнур у будь-які рідини. Оберігайте від вологості.
- Якщо мережевий шнур пошкоджений, його необхідно полагодити тільки в спеціальному сервісному центрі.
- Забороняється користуватися грілкою, якщо вона волога.
- Уникайте щільного згинання грілки.
- Забороняється класти перемикач на грілку, під грілку, накривати її під час експлуатації.
- Коли прилад включений:
 - Забороняється класти на грілку величезні й важкі предмети, наприклад валізи та ін.,
 - Забороняється розміщати джерела тепла, такі як пляшки з гарячою водою, електроподушки й т.п.,
 - Забороняється ховати перемикач під грілку, подушку й класти його зверху на грілку.
- Не складайте грілку, поки вона не охолоне.
- Періодично перевіряйте грілку й мережевий шнур на наявність пошкоджень і несправностей. Якщо зауважили пошкодження або прилад працює невідповідно, зверніться в найближчий сервісний центр.
- Якщо ви не користуєтеся грілкою, від'єднайте її від мережі. Зберігайте прилад у сухому місці, бажано в оригінальному упакуванні.
- Забороняється користуватися електрогрілкою маленьким дітям без нагляду батьків.
- **Для зберігання приладу дайте йому повністю охолонути, перш ніж складати.**
- **Під час зберігання забороняється ставити зверху на прилад сторонні предмети, щоб запобігти зминанню грілки.**



ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Будь ласка, не користуйтеся грілкою в складеному або зім'ятому вигляді. Завжди використовуйте спеціальний чохол, навіть якщо ви користуєтеся ефірними маслами й мазями. Це необхідно,

щоб запобігти пошкодженню синтетичної поверхні грілки. При першому використанні ви можете почути запах синтетичного матеріалу. Цей запах зникне після деякого часу.


1. Підключіть прилад до мережі. Джерело живлення для грілки тільки 220В-240В.
2. Включіть роботу грілки за допомогою перемикача.

“3” = максимальне нагрівання

“2” = помірне нагрівання

“1” = мінімальне нагрівання

“0” = , відключення. Живлення відключене від електрогрілки.

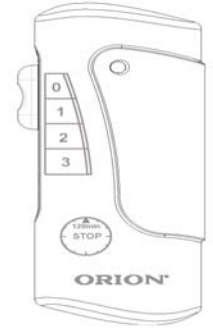

Індикатор живлення світиться під час нагрівання. Миготливий індикатор означає, що прилад досяг необхідної температури. Після закінчення 120 хвилин грілка автоматично відключиться. Щоб включити прилад, перемикач поставте спочатку на “0”, через 5 секунд ви зможете знову включити прилад.

Коли грілка включена, перемикач може трохи нагрітися від електрокомпонентів усередині перемикача. Забороняється під час роботи приладу класти перемикач на грілку.

УВАГА: протягом 120 хвилин роботи приладу світловий індикатор може не горіти. Це не означає, що грілка автоматично відключилася. Це значить, що грілка досягла необхідної стабільної температури.

Не використовуйте руки, як індикатор температури грілки, оскільки вони менше чутливі до тепла в порівнянні з тілом. Температура, що здається теплуватою для рук, може бути неприємно гарячою для тіла.

Ремонт приладу може робити тільки фахівець сервісного центру.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Будь ласка, чистіть чохол відповідно до символів на його етикетці. Перед чищенням, зніміть чохол із грілки. Синтетичну поверхню грілки можна протерти вологою губкою. Забороняється використовувати розчинники. Користуватися приладом дозволяється тільки в сухому виді із чохлом.

Додаткова інформація

Дизайн грілки спеціально розроблений для прогрівання спини та шиї. Верхня застібка-липучка забезпечує точну посадку грілки в районі шиї, а гнучка застібка - унизу. Застібки регулюються під будь-який розмір. До того ж, регулюючи ремінець, Ви можете змінити відстань між грілкою й тілом, а також інтенсивність нагрівання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: ORION OWP15NB
Розмір: 40*56см
Електроживлення: 220В-240В ~50Гц
Потужність: 80Вт
Вага нетто: 0,49кг
Довжина шнура живлення: 2,6м
Колір: світложовтий

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися де-які розбіжності. Ми надіємось, що користувач зверне на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua