

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**МАСАЖНА
ВАННОЧКА ДЛЯ НІГ**

УКРАЇНСЬКА UA

Модель: OR-MS12



Шановні покупці!

Ми дуже ВДЯЧНІ Вам за купівлю масажної ванночки для ніг ORION!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати щире задоволення від функцій і можливостей цього виробу!

Перед експлуатацією, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на майбутнє.

ОПИС

Регулярне використання ванночки для ніг істотно поліпшить циркуляцію крові в судинах ніг. Під час використання Ви відчуєте приємну й тривалу теплоту в ногах (підвищення температури шкіри).

Коли Ви ввімкнете перемикач режимів на приладі, вбудовані нагрівальні елементи на всю довжину під кожною підставкою для ніг будуть підтримувати необхідну температуру води під час сеансу масажу.

Спеціальні точки масажування, контактуючи зі ступнями ніг (до 355 разів), дадуть Вам можливість відчути м'який та ефективний масаж. Ви можете контролювати ефективність масажу, притискаючи стопи або послабляючи тиск на масажну поверхню в центрі ванночки. З 68 отворів для повітря під час масажу виходить безліч повітряних бульбашок, які забезпечують розслаблюючий ефект.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Під час користування електричними приладами необхідно дотримуватись основних засобів безпеки, особливо, якщо поруч перебувають діти:

1. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
2. Забороняється вклучати/виклучати прилад, якщо ступні ніг перебувають у воді.
3. Перед підключенням і відключенням приладу від мережі переконайтеся, що перемикач виключений або перебуває в положенні «0».
4. Забороняється занурювати прилад повністю у воду або в інші рідини. Не ставте на прилад, усередину приладу інші предмети. Не можна вставати у ванночці. Використовуйте її тільки в сидячому положенні.
5. Обов'язково відключайте прилад, якщо він не використовується, а також при його наповненні водою, чищенні або переміщенні.
6. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
7. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.
8. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
9. Не користуйтеся приладом у сонному стані або в стані сильної втоми.
10. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.
11. Ніколи не використовуйте прилад поза приміщеннями.
12. Завжди ставте прилад на рівну поверхню.
13. Відразу припиняйте користуватися приладом з появою дискомфорту, болі або подразненням шкіри.
14. Ванночкою для ніг не можна користуватися у випадках: доброякісних і злоякісних пухлин, запалення шкіри, запалення вен і тромбозу, відкритих і свіжих ран, синців, здертої шкіри або варикозних вен, не встановлених болів гомілки або болів суглобів.
15. З усіх виниклих питань проконсультуйтеся з лікарем.
16. Під'єднайте прилад до мережі з заземленням.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ І ДОГЛЯД

Прилад призначений для домашнього використання. Не намагайтеся самі розібрати прилад або замінити деталі. Будь ласка, зверніться в сервісний центр. Прилад призначений для лікувальних процедур. Не використовуйте його для миття ніг. Перед експлуатацією приладу, помийте ступні ніг. Також використовуйте чисту воду у ванночці, інакше осад закупорить отвори для повітря й знизить ефективність повітряних бульбашок.

ЧИЩЕННЯ: після експлуатації промийте прилад водою або ополосніть ванночку водою з нейтральним миючим засобом. **Забороняється занурювати прилад повністю у воду або в інші рідини.** Для чищення зовнішньої поверхні використовуйте м'яку ганчірку, змочену в мильному розчині.

ЗБЕРІГАННЯ: Переконайтеся, що прилад відключений від мережі, охолонув, у ньому немає води. Мережний шнур акуратно змотайте навколо тримача для шнура. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур. Зберігайте прилад у чистому сухому місці.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

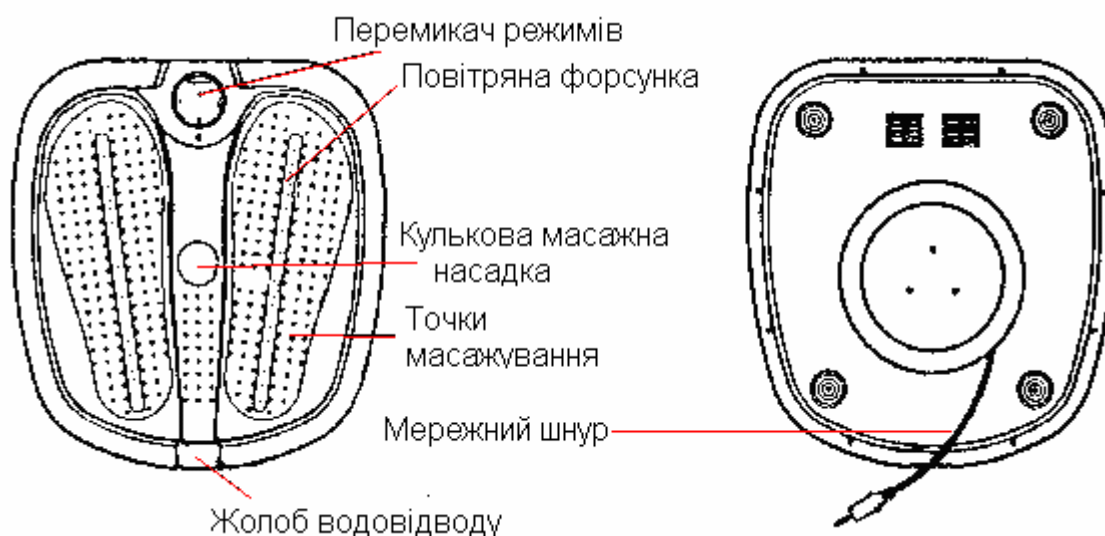

1. Прилад призначений для роботи з водою. Прилад можна також використовувати без води. Переконайтеся, що перемикач режимів роботи вимкнений або перебуває в положенні «0».
2. Переконайтеся, що прилад не підключений до мережі.
3. Поставте ванночку на підлогу, наповніть її теплою водою до рівня MAX і підключіть до мережі. Не наповнюйте ванночку вище вказаної позначки.

Забороняється включати/виключати прилад, якщо ступні ніг перебувають у воді!!!

4. Сядьте на стілець й опустіть ноги у воду. У ванночці не можна вставати. Виберіть необхідне налаштування:

- Підігрів
- Масаж
- Підігрів і масаж

5. Перемикачем режимів роботи Ви можете встановити необхідний режим:

- **МАСАЖ У ХОЛОДНІЙ ВОДІ АБО МАСАЖ СТУПЕНЬ БЕЗ ВОДИ (М)**

Установіть перемикач на дану позначку, якщо Ви хочете зробити масаж ступень у холодній воді або вібраційний масаж ступень ніг без води. Ванночку також можна використовувати для сухого масажу ніг. Сухий масаж покращує циркуляцію крові в ступнях ніг.

- **МАСАЖ У ТЕПЛІЙ ВОДІ З БУЛЬБАШКАМИ (W+A+M)**

Установіть перемикач на дану позначку, якщо Ви хочете зробити масаж ступень у теплій воді з бульбашками. Вбудовані нагрівальні елементи будуть підтримувати температуру води у ванночці під час процедури.

- **ТЕПЛА ВОДА З БУЛЬБАШКАМИ (W+A)**

Встановіть перемикач на дану позначку, якщо Ви хочете потримати ступні ніг у теплій воді з бульбашками. Ідеальний розслаблюючий режим після масажу ступень ніг.

- **КОЛІЩАТКОВА НАСАДКА + 2 ДОДАТКОВІ ЦЕНТРАЛЬНІ НАСАДКИ**

Ви також можете масажувати ступні ніг за допомогою обертової коліщаткової насадки або іншої додаткової центральної насадки (частковий масаж), що розміщується в центрі ванночки.




- **OFF (0)**

Встановіть перемикач на дану позначку, якщо Ви хочете вимкнути прилад.


Зверніть увагу: режим підігріву передбачає підтримування температури вже теплої води, а не її нагрівання.

6. Після закінчення процедури перемикачем відключіть живлення.
7. Вийміть ноги з води й знеструмте прилад, вийнявши мережну вилку з розетки.
8. Злийте воду.


СХЕМАТИЧНІ МАЛЮНКИ ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖНОЇ ВАННОЧКИ

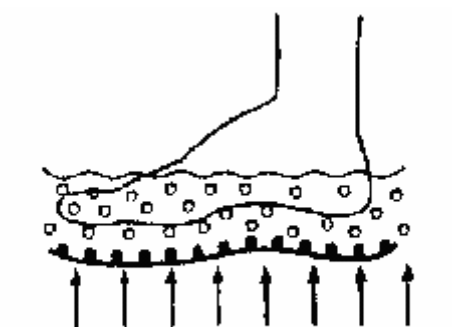

Бульбашки + Підігрів + Масаж

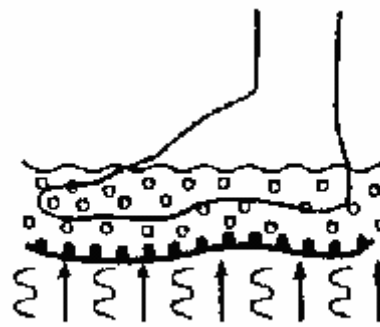


Підігрів + Бульбашки

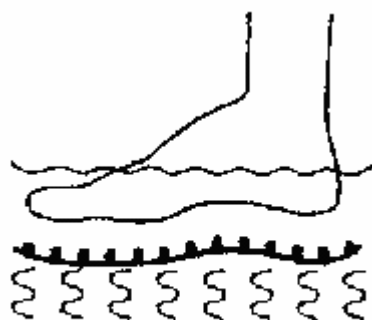


Масаж



Коліщаткова насадка

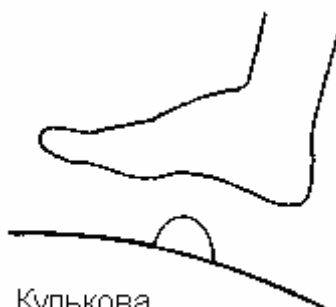

Купальова насадка

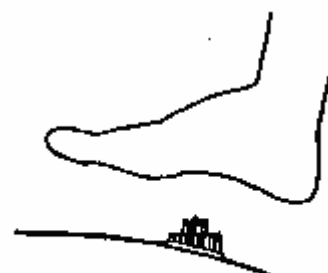

Насадка для стимулюючого акупунктурного масажу

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Напруга живлення:	230В~50 Гц
Потужність підігріву:	85 Вт
Наявність додаткових центральних насадок:	3
Знімна кришка:	Є

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua