

# ORION®



ORION ELECTRONICS LTD (EUROPE)

## ЭЛЕКТРОГРЕЛКА ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: ORION OWP15NB

Спасибо за Ваш выбор ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ "ORION". Перед использованием прибора, пожалуйста, прочитайте внимательно данную Инструкцию и храните ее в доступном месте.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Всегда будьте предельно внимательны с электроприборами!

Эта электрогрелка прослужит Вам долгие годы, если вы будете следовать всем инструкциям, использовать ее только по назначению и бережно к ней относиться. Внимательно прочитайте следующие инструкции, чтобы избежать любых повреждений и опасности от неправильной эксплуатации прибора. Сохраните Инструкцию, чтобы всегда можно было пересмотреть правила использования.

Если прибором пользуется еще кто то кроме Вас, дайте ему сперва почитать Инструкцию.

Этот прибор не предназначен для медицинского использования в больницах

- Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям.
- Прибор предназначен для использования как грелкой спины и шеи.
- Подсоединяйте к электросети с электропитанием, указанным на этикетке прибора.
- Запрещается пользоваться грелкой в сложенном или в скомканном виде.
- Электрогрелкой запрещается пользоваться людям, которые не в состоянии двигаться без посторонней помощи, маленьким детям, людям, которые не ощущают тепла, животным.
- Запрещается пользоваться грелкой без надзора.
- Внимание! Не спите во время работы грелки.
- Длительное использование может быть причиной ожогов.
- Запрещается прокалывать электрогрелку иглой или другими острыми предметами.
- Запрещается силой тянуть за сетевой шнур, скручивать его.
- Запрещается погружать переключатель или сетевой шнур в любые жидкости, подвергать влажности.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо починить только в специальном сервисном центре.
- Запрещается пользоваться грелкой, если она влажная.
- Избегайте плотного сгибания грелки.
- Запрещается класть переключатель на грелку, под грелку, накрывать его во время эксплуатации.
- Когда прибор включен:
  - Запрещается ложить на грелку огромные и тяжелые предметы, например чемоданы и др.,
  - Запрещается размещать источники тепла, такие как бутылки с горячей водой, электроподушки и т.п.,
  - Запрещается прятать переключатель под грелку, подушки и ложить его сверху на грелку.
- Не складывайте грелку, пока она не остынет.
- Периодически проверяйте грелку и сетевой шнур на наличие повреждений и неисправностей. Если заметите повреждения или прибор работает несоответственно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если вы не пользуетесь грелкой, отсоедините ее от сети. Храните прибор в сухом месте, желательно в оригинальной упаковке.
- Запрещается пользоваться электрогрелкой маленьким детям без надзора родителей.
- Для хранения прибора дайте ему полностью остыть, прежде чем складывать.
- Во время хранения запрещается ставить сверху на прибор посторонние предметы во избежание сминания грелки.



## ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Пожалуйста, не пользуйтесь грелкой в сложенном или скомканном виде. Всегда используйте специальный чехол, даже если вы пользуетесь эфирными маслами и мазями. Эта мера необходима, чтобы предотвратить повреждение синтетической поверхности грелки. При первом использовании вы можете услышать запах синтетического материала. Этот запах исчезнет после некоторого времени.


1. Подключите прибор к сети. Источник питания для грелки только 220В-240В.
2. Включите работу грелки с помощью переключателя.

“3” = максимальное нагревание

“2” = умеренное нагревание

“1” = минимальное нагревание

“0” = , отключение. Питание отключено от электрогрелки.

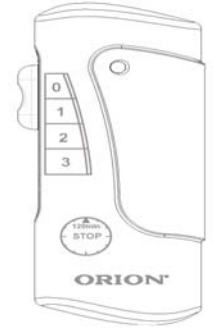

Индикатор питания светится во время нагревания. Мигающий индикатор означает, что прибор достиг необходимой температуры. По истечении 120 минут грелка автоматически отключится. Чтобы включить прибор, переключатель поставьте сначала на “0”, через 5 секунд вы сможете снова включить прибор.

Когда грелка включена, переключатель может немного нагреться от электрокомпонентов внутри переключателя. Запрещается во время работы прибора класть переключатель на грелку.

**ВНИМАНИЕ:** на протяжении 120 минут работы прибора световой индикатор может не гореть. Это не значит, что грелка автоматически отключилась. Это значит, что грелка достигла необходимой стабильной температуры.

Не используйте руки, как индикатор температуры грелки, поскольку они меньше чувствительны к теплу по сравнению с телом. Температура, которая покажется тепловатой для рук, может быть неприятно горячей для тела.

Ремонт прибора может производить только специалист сервисного центра.

## ЧИСТКА И УХОД

Пожалуйста, чистите чехол в соответствии с символами на его этикетке. Перед чисткой, снимите чехол с грелки. Синтетическую поверхность грелки можно протереть влажной губкой. Запрещается использовать растворители. Пользоваться прибором разрешается только в сухом виде с чехлом.

### **Дополнительная информация**

Дизайн грелки специально разработан для прогревания спины и шеи. Верхняя застёжка-липучка обеспечивает точную посадку грелки в районе шеи, а гибкая застёжка - внизу. Застежки регулируются под любой размер. К тому же, регулируя ремешок, Вы можете изменить расстояние между грелкой и телом и интенсивность нагревания.

# СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: ORION OWP15NB

Размер: 40\*56см

Электропитание: 220-240В ~50Гц

Мощность: 80Вт

Вес нетто: 0,49кг

Длина сетевого шнура: 2,6м

Цвет: светло-желтый

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)